


UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SCULPTOR™

MASAŽER

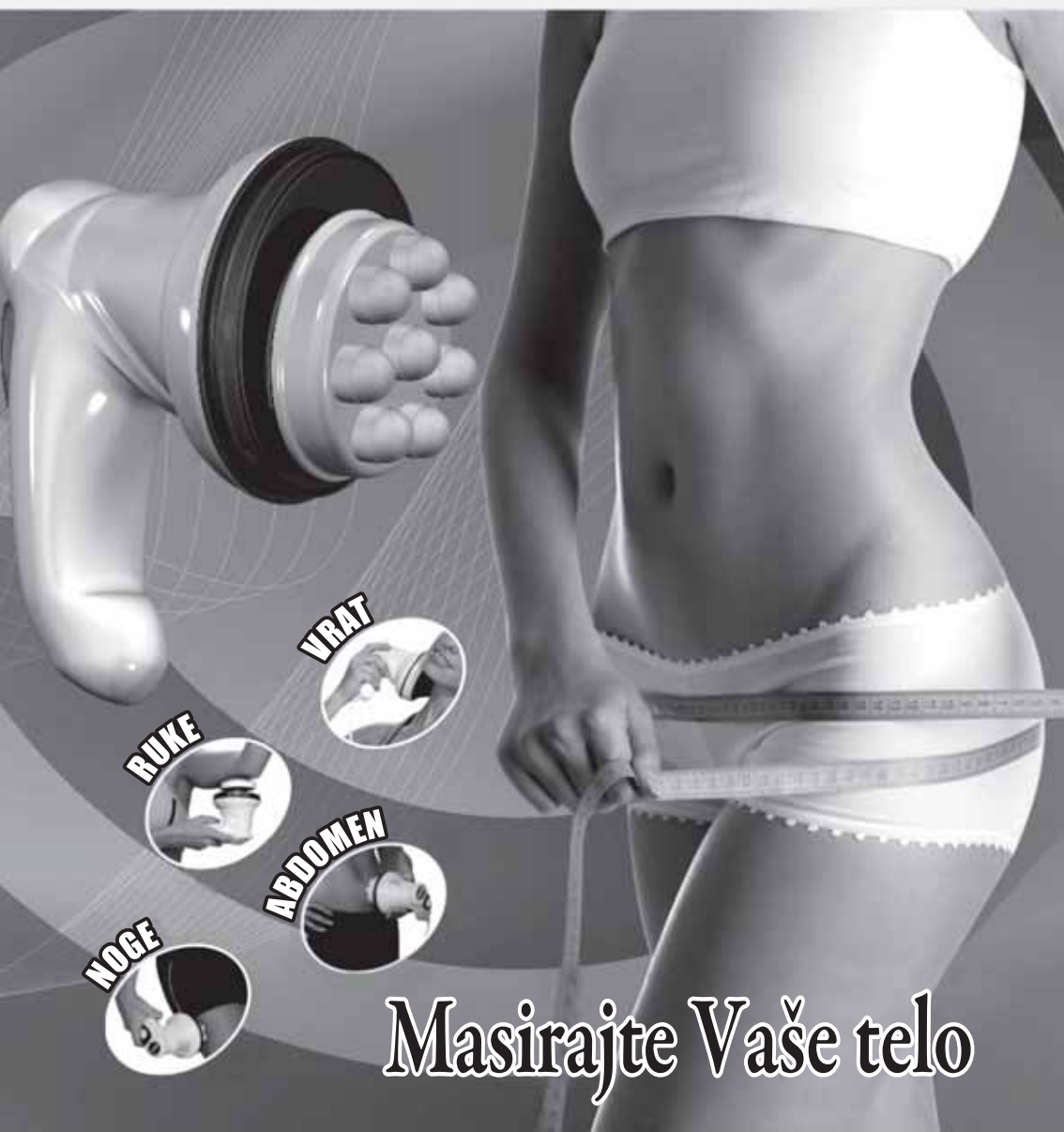

RUKE

VRAT

ABDOMEN

NOGE

Masirajte Vaše telo

Novi Sculptor bodi masažer će vam pružiti oblikovano telo koje ste oduvek želeli. Toliko je dobar da ćete se potpuno oduševiti. Masne naslage se ne mogu odbraniti od Sculptor masažera. Potrebno je da se cilja određeni deo tela kako bi se mogao najbolje oblikovati. Nema potrebe za skupim spa tretmanima ili komplikovanim vežbama. Možete ga koristiti u udobnosti svog doma.

Sculptor je odličan masažer za vrat, leđa, a može da se koristi i za poboljšanje cirkulacije, masiranje nogu, eliminisanje umora i odmor Vaših mišića.

Duboka masaža uz Sculptor bodi masažer u kombinaciji sa Vašim omiljenim gelom za masažu, losionom ili anti-celulit kremom, može da napravi još bolji efekat. Odmah ćete videti kako vam je telo definisano i zategnuto.

KARAKTERISTIKE:



- Napravljen i dizajniran tako da se prilagođava oblinama Vašeg tela.
- Lagan, priručan i udoban.
- Nosite ga svugde, kako biste bilo kad relaksirali mišiće.
- Jedinstvena brza rotacija i moćna masaža uklanjaju bol.
- Oslobođa pritiska, vraća vitalnost i energiju.

Sculptor bodi masažer može ispuniti vaše različite potrebe uz samo nekoliko jednostavnih podešavanja:

- Dodatak za masažu vam može pomoći da se oslobodite stresa i da se opustite.
- Rotirajuća glava pomaže u oblikovanju tela.
- Talasasti dodatak će vam omogućiti duboku masažu.

ŠTA SE NALAZI U PAKOVANJU:

U kompletu se nalaze 4 ekskluzivna Sculptor promenjiva dodatka:

1. Sculptor dodatak za masažu koji pomaže u eliminisanju masnih naslaga i viška kilograma.
2. Uz Sculptor talasasti dodatak uživaćete u masažama vrata, ramenima, leđima ili nogama. Savršen je za smanjivanje umora u vašim mišićima.
3. Sculptor rotirajuća glava sa 8 sfera koje su anatomski i specijalno dizajnirane da prodiru duboko uz bilo koji gel, ulje ili anti-celulit kremu, i tako ćete se rešiti viška kilograma, strija i celulita vrlo brzo.
4. Sculptor jastuče koje se pere je za prijatniju masažu, u predelu vrata i leđa.

SCULPTOR

ZAŠTO SCULPTOR?

Sculptor masažer je idealan način da se preoblikuje i zategne celo telo bez vežbanja. Tajna je u ekskluzivnom dizajnu koji ima više od 2700 obrtaja u minuti.

DELOVI SCULPTOR MASAŽERA:



UPOTREBA:

- Priključite aparat u struju i pritisnite dugme ON okrećući regulator brzine u pravcu skazaljki na satu.
- Postavite glavu za masažu na deo tela koji želite da tretirate.
- Kako biste promenili glavu masažera, samo skinite staru i stavite novu.
- Zaštitna tkanina sprečava da se kosa uplete u glavu masažera.
- Da smanjite obim ili celulit, kombinujte Sculptor sa svojim omiljenim gelom za zatezanje ili anti-celulit kremom.
- Ručica za podešavanje brzine može da se podese na željenu brzinu i intenzitet.
- Da ga isključite, okrenite ručicu za podešavanje brzine na suprotnu stranu.
- Isključite iz električnog izvora.

VAŽNO:

- Zaštitno jastuče treba da se koristi samo uz talasasti dodatak, nemojte ga koristiti sa rotirajućim dodatkom
- Zaštitno jastuče u kombinaciji sa talasastim dodatkom je pogodno za delove tela gde se dlake mogu upetljati
- Nemojte koristiti rotirajuću glavu na delovima gde se dlake mogu upetljati



Pobrinite da je aparat isključen pre nego što ga uključite u struju. Prvo počnite na najnižoj brzini, a onda polako povećavajte brzinu. Nemojte masirati jedan deo tela duže od 10 minuta.

Ruke moraju da budu suve.

Konsultujte doktora ukoliko patite od nekih bolesti, ili ste pod nekim tretmanom ili u drugom stanju.

Ovo nije medicinski aparat i predviđen je samo za masažu.

UPOZORENJE: OSOBE MLAĐE OD 18 GODINA NE SMEJU DA KORISTE BEZ NADZORA ODRASLE OSOBE. NEMOJTE GA KORISTITI UKOLIKO STE U DRUGOM STANJU, ukoliko patite od nekog zdravstvenog problema obavezno konsultujte doktora pre upotrebe.

Distribucija

TV
shop

011 / 20 28 600

www.tv-shop.tv

office@tv-shop.tv

SCULPTOR™
MASAŽER

UPOZORENJE:

OSOBE MLAĐE OD 18 GODINA NE SMEJU DA KORISTE BEZ NADZORA
ODRASLE OSOBE.

NEMOJTE GA KORISTITI UKOLIKO STE U DRUGOM STANJU, ukoliko patite od
nekog zdravstvenog problema obavezno konsultujte doktora pre upotrebe.